

S-CAPE® MEDICAL MULTICONSOLE D1

D1 · 24 | 27 | 32 | 42 | 47 | 55

andere Bildschirmgrößen auf Anfrage



Vorbereitet für PRIME365 Integrationslösung.

Verschiedene Oberflächen und Farben

Die MULTICONSOLE der nächsten Generation: bereit für die wachsenden digitalen Workflow- Anforderungen.

Die **MULTICONSOLE** ist das Herzstück für Ihren digitalen OP-Workflow, zur Anzeige von medizinischen Informationen und Bilddaten, ohne dabei auf die höchsten hygienischen und ergonomischen Standards zu verzichten.

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten:

- verschiedene Displaygrößen und Technologien
- Vielzahl an Zusatzgeräten für Ein- und Ausgabe
- große Fülle an Oberflächen und Farben
- Optionen für wandintegrierte oder Aufputz-Montage
- »Zero-Footprint« Integration

Weitere Informationen über die S-CAPE® MEDICAL MULTICONSOLE (MMC) sowie die PRIME365 Softwarelösung:

S-CAPE® GmbH
Komturstraße 18a, 12099 Berlin
T: +49 30 7130297-0
E: info@s-cape.com
www.s-cape.com

Technische Daten

Gehäuse:

- + Metall, pulverbeschichtet RAL 9010 mit entspiegeltem Sicherheitsglas zum optimalen Schutz der Displayfläche
- + *optional*: RAL-Farbe nach Wahl oder Edelstahl

Displays:

- + Full-HD Auflösung (1920 x 1080 px), DICOM-Preset für 32" bis 55" Display
- + *optional*: DICOM-Preset für 24" und 27" Display

Leistung:

- + Mainboard mit INTEL® Core™ i5 Prozessor, *optional*: INTEL® Core™ i7 Prozessor
- + 8 GB RAM (erweiterbar bis 32 GB)
- + LAN RJ 45 Gigabit (10/100/1000 Mb/s)
- + *optional*: mit galvanischer Trennung, Glasfaser oder WLAN
- + 250 GB SATA SSD *oder andere Festplatten*

Eigenschaften:

- + nach oben klappbare Front für optimalen Servicezugang
- + keine sichtbare Kabelführung
- + Silikon-Kurzhub-Tastatur mit Touchpad, Mausablage und OP-tauglicher Silikonmaus
- + *optional*: komplett desinfizierbare, antimikrobiell beschichtete, medizinische Folientastatur
- + *optional*: integriertes CD/DVD Laufwerk*
- + USB 2.0 Anschluss, frontseitig (weitere USB-Anschlüsse optional möglich)
- + vorbereitet für PRIME365 Integrationslösung**

* Verlust der Schutzklasse IP65

** projektspezifisch können zusätzliche Gehäuse für die technische Ausstattung erforderlich werden



Bedienbar per Touch und/oder Tastatur.

+ Zusatzgeräte


S-CAPE[®] MMC
EXTERNALDISPLAY



CD/DVD-Laufwerk*



Kartenleser*

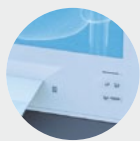

Multifunktions-
Anzeige



Lautsprecher



Barcode-/
QR-Code-Scanner



Schnittstellen

intern / extern



Die MULTICONSOLE ist Ihr Einstieg in die MMC-Familie mit der PRIME365 Software.

Mit der Integration weiterer Module können Sie Ihre **MULTICONSOLE** zur zentralen Bedieneinheit des Operationssaales ausbauen.**

Dank der neuen **PRIME365** Softwarelösung hat das OP-Team stets ein Höchstmaß an klinischen Detailinformationen zur Hand. **PRIME365** ermöglicht einen effizienteren Fluss von klinischen Daten und Patienteninformationen innerhalb und außerhalb des OPs. Bedienbar per Touch und/oder Tastatur.

Ihre modulare digitale
OP-Integrationslösung.



- + Darstellung weiterer Videoquellen
- + Video-Routing
- + Bildverarbeitung und Archivierung
- + Kommunikation und / oder Integration von KIS- / PACS-Systemen
- + Video-Streaming und / oder Videokonferenz